




# CKX53専用 蛍光ユニット

## CKX53専用蛍光ユニット BT-ExCi

ご希望の多かったCKX53専用機がついに登場！！

お値段以上の性能を、  
デモ機にてお確かめください。

CKX53専用の蛍光ユニットです。  
お持ちのCKX53に取付できます。  
培養室内で発現の確認を安価に行うことができます。  
最大4励起光源を搭載することができます。

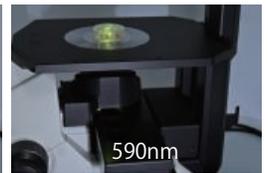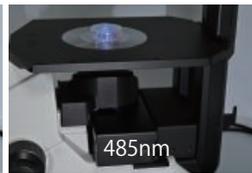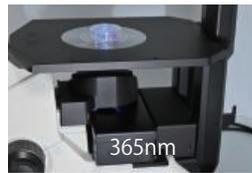

### 顕微鏡 蛍光ユニット BT-ExCiB

(485nm 励起光源セット) **キャンペーン金額 ¥268,000**

- ・励起光源は下記5色の中から最大4色までお選びいただけます。  
UV-365nm B-485nm G-530nm A-590nm R-630nm
- ・励起光源はあとからでも追加可能です。  
3光源用ユニットにタイミングを見ながら、1光源ずつ光源を乗せていくこともできます。  
ぜひご相談ください。
- ・コントロールユニットには、On-Offスイッチと照度コントロールボリュームがついています。
- ・エミッションフィルターは、色素や多重染色に合わせてバンドパスフィルターもしくは  
ロングパスフィルターから選択することもできます。

### ただ今、遮光板をプレゼント中

コンデンサーに取付することで、明るい環境下での蛍光を  
コントラストの高い蛍光観察を行うことができます。



品名	波長組み合わせ	型式	金額	キャンペーン金額
	下記5色より3色まで組合せ可能			
1光源セット	UV (Ex365/DM415/Em460BP)	BT-ExCi○	¥348,000	<b>¥268,000</b>
	B (Ex485/DM500/Em530BP)			
2光源セット	G (Ex530/DM565/Em590LP)	BT-ExCi○○	¥513,000	<b>¥398,000</b>
	A (Ex590/DM605/Em620LP)			
3光源セット	R (Ex630/DM660/Em670LP)	BT-ExCi○○○	¥708,000	<b>¥548,000</b>

選択可能な光源はすべてで5種類 (UV、B、G、A、R) です。詳しい組み合わせと型式はHPでご確認ください。  
セットできる光源の数によって値段が変わりますのでご注意ください。

ご用命は

## バイオツールズ株式会社

〒370-3531 群馬県高崎市足門町 854-7  
TEL 027-384-3791 FAX 027-384-3792

東日本担当 宮崎 隆  
携帯: 090-1653-1568  
E-mail: miyazaki@biotools.jp  
info@biotools.jp

西日本担当 宮崎 聖  
携帯: 090-1895-1853  
E-mail: mysho@biotools.jp  
http://www.biotools.jp